

HARU-2 Measure クイックガイド



本書は計測時の簡便な操作のための分冊ガイドです。
HARU-2のご使用には『HARU-2 取扱説明書』の本編
をよくお読みいただき、内容を十分ご理解の上ご使用く
ださい。


1. 電極の装着




1. 拭き取りシート等で、額と
耳の後ろをよくふきます。

POINT


皮脂や化粧をしっかりと落としましょう

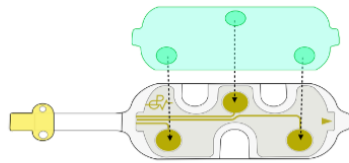

2. 電極シートの3つの電極位置
に、3つの導電ゲルを合わせて
貼り合わせます。

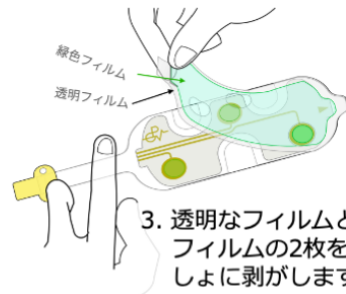

3. 透明なフィルムと緑の
フィルムの2枚をいっ
しょに剥がします。

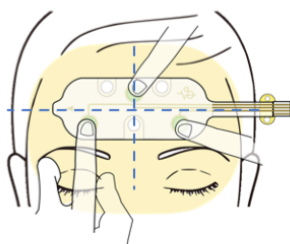


4. 額の真ん中に電極シートを貼
り、電極を指で密着させます。




5. 電極シート裏の白い保護
フィルムを剥がします。


2. 脳波計の装着

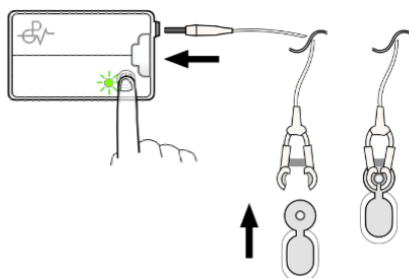


1. 脳波計電源ONし、リファレンス電極
を取り付けたリファレンスケーブルを挿
しこみます。

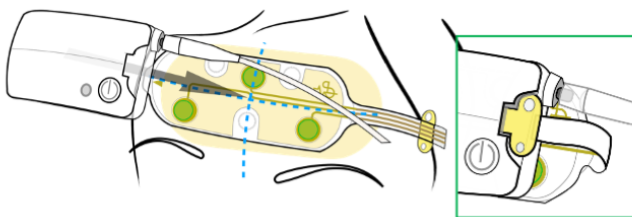

2. 脳波計を電極の上に貼り、電極
シートのコネクタを挿しこみます。

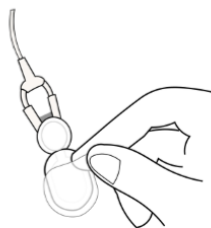

3. リファレンス電極の透明な
保護フィルムを剥がします。

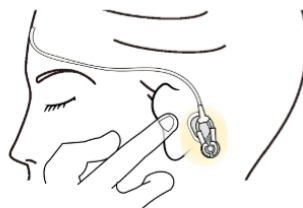


4. 左耳の裏の硬い部分に、**図
の向きで**リファレンス電極を
貼ります。

3. 計測を開始

1. 「HARU-2」アプリを起動します。



2. アプリと脳波計を接続します。

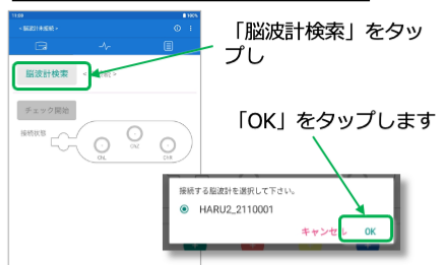

3. 装着状態とノイズを確認します。



4. 計測画面で「計測開始ボタン」をタップし、計測を開始します。



POINT


電磁波の影響を少なくするために
各種電子機器のACアダプタ
およびその他のコンセントから
1m以上離れて計測してください。



4. 計測の終了

1. 「計測停止ボタン」をタップして、計測を終了します。

計測停止ボタン

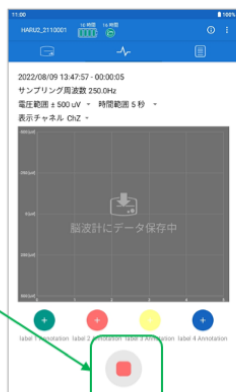


2. 脳波計と電極をはずします。

まずリファレンス電極をゆっくりはがしてください。



5. データの取り出しと充電

1. 脳波計とタブレット・スマホをケーブルで接続し、脳波計からデータを取り出します。

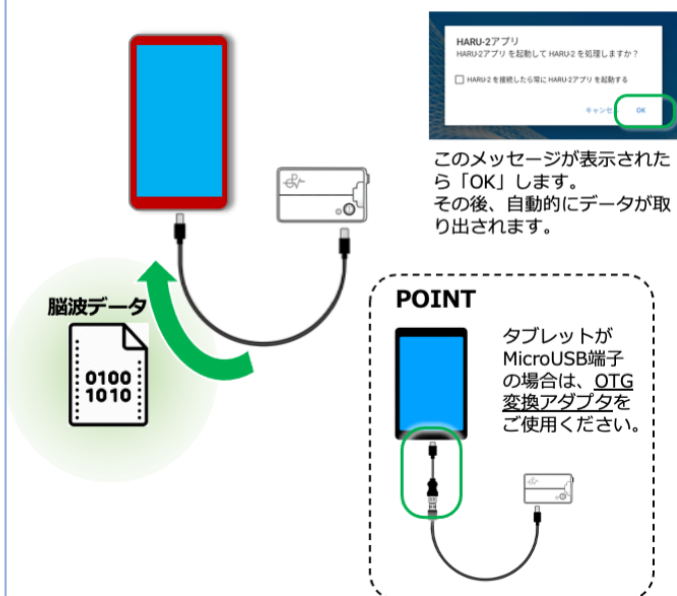

2. 脳波計とタブレット・スマホを充電しておきます。

